


МОДЕЛЬ ISee Special*

*ай-си спешл
 Массажер для глаз


Инструкция Пользователя



1040120557

ISee371说明书.Indd 2-3

2009-7-21 9:05:38

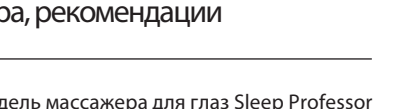

Спасибо, что приобрели массажер Sleep Professor™ ISee Special®
 Перед использованием массажера необходимо внимательно изучить информацию, приведенную в данной инструкции. Если массажер будут использовать несколько человек, то все должны быть ознакомлены с руководством по эксплуатации.
 Мы желаем Вам приятного отдыха!

Назначение массажера, рекомендации по использованию

Представляем новейшую модель массажера для глаз Sleep Professor ISee Special, в основе работы которого лежит теория акупунктурного воздействия. Прибор оказывает вибромассажное, тепловое, компрессионное, и воздействие магнитным полем на область глаз с использованием современных достижений косметологии.
 Дизайн, функции, форма прибора были разработаны при помощи новейших компьютерных технологий. Форма устройства оптимальна и повторяет контуры лица. Разработка массажера велась при участии компании с мировым именем BREO, специализирующейся на товарах для отдыха и релаксации, и основывалась на методиках восточного массажа и методах психологии.
 Аналогов модели Sleep Professor ISee Special нет, специальные режимы оптимально подобраны специалистами Sleep Professor (доктор Роберт Оксман) и специалистами BREO.

Инновационное решение для улучшения сна и отдыха!

1

2

ISee371说明书.Indd 6-7

2009-7-21 9:05:38

Назначение массажера, рекомендации по использованию

Микропроцессорное управление, выполняющие интеллектуальные сеансы массажа, помогает выбрать необходимый режим воздействия. Воздушно - компрессионный массаж создается с помощью воздушных подушек, которые надуваются за счет работы внутреннего компрессора. Этот прогревающий метод успокаивает, расслабляет и способствует снятию головной боли и стресса. Мультичастотный вибромассаж стимулирует рефлекторные точки. Массаж, с помощью различных режимов вибрации, снимает напряжение с мышц и улучшает их гибкость. Функция инфракрасного прогрева повышает эффективность других видов массажа, стимулирует кровообращение, ускоряет процесс восстановления. Для полной психологической разгрузки и снятия стресса в массажере присутствует звуковая терапия. Музыка помогает успокоиться и получить удовольствие от массажа. Воздействие магнитного поля на мышечную, нервную и кровеносную систему органов зрения проявляется на клеточном уровне, изменяя проницаемость мембран, что благотворно сказывается на процессах обмена веществ.
 Использование этого массажера приводит к повышению уровня кислорода, улучшению кровотока в параорбитальных тканях, нормализации тонуса сосудов и расслаблению, снятию спазма глазодвигательных мышц.
 С помощью массажера для глаз Sleep Professor ISee Special Вы восстанавливаете четкость зрения при утомлении глаз, нормализуете режим сна, повышаете работоспособность головного мозга, добиваетесь замечательного косметического эффекта. Кроме того, массажер способствует увеличению умственной концентрации и улучшает общее настроение.
 Благодаря активному воздействию на ткани, массажер способствует разглаживанию морщин в области глаз, уменьшению отеков, мешков и темных кругов под глазами.

Назначение массажера, рекомендации по использованию

Особенно хорошо помогает расслабиться и снять напряжение после активного трудового дня, позволяя восстановить нормальный режим сна и проснуться полными сил и энергии! Модель разработана для применения различными пользователями. Массажер компактен, прост и удобен в обращении, легко одевается, выполнен из экологически чистых, современных материалов.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
 - людям, страдающим близорукостью, ослаблением зрения и астigmatизмом, амблиопией
 - людям, страдающим от напряжения глаз, вызванного длительной работой или учебой
 - людям с нехваткой сна, темными кругами или «мешками» под глазами, а также с «гусиными лапками» у глаз
 - при длительной работе за компьютером
 - для снятия припухлостей или темных кругов под глазами, при бессоннице и головной боли
 - студентам высших и средних учебных заведений, которые часто страдают от ложной близорукости, связанной со спазмом accommodation на фоне переутомления
 - служащим, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой: операторы компьютеров, бухгалтеры, дизайнеры, секретари, учителя и водители
 - лицам с наличием пресбиопии (возрастные изменения преломляющей силы глаза, которые требуют ношения «плюсовых» очков)
 - для отдыха и релаксации
 Как показал опыт использования, массажер не вызывает привыкания и исключает возникновение любых аллергических реакций. Побочные действия не выявлены.
 Тем не менее, применять устройство противопоказано при наличии:

3

4

ISee371说明书.Indd 6-7


2009-7-21 9:05:38

Назначение массажера, рекомендации по использованию

- травм и ожогов глаз, черепно-мозговых травм, острых воспалительных и инфекционных процессов, глаукомы, катаракты, ретинопатии
 - других, не указанных выше, серьезных заболеваний глаз,
 - нарушении целостности кожи, травм в месте воздействия, последствий операций
 - онкологических заболеваний, обострения тяжелых хронических заболеваний
 - тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы
 - гипотонических состояний, неврологических заболеваний
 Не предназначен для использования детьми.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
 1. Рекомендуется снять контактные линзы, заколки и украшения для волос перед использованием массажера, удалить макияж.
 2. Во время использования не держите за кабель устройства. Не разбирайте устройство самостоятельно.
 3. Оденьте устройство прежде, чем Вы его включите.
 4. Не производите чистку устройства с использованием воды. Применяйте чистую увлажненную спиритом хлопковую или фланелевую ткань. Не используйте устройство при условиях повышенной температуры и влажности.
 5. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей.
 6. Не используйте устройство во время прогулок и за рулем автомобиля.
 7. USB шнур и наушники подходят только для этого массажера и не могут быть использованы с другими устройствами.
 8. Данный массажер разработан для домашнего использования и не подходит для диагностики, лечения, а так же коммерческого использования. Не является медицинским изделием.
 10. Продолжительность массажа регулируется по Вашему желанию, рекомендованная продолжительность сеанса массажа не более 15 минут.

Комплектация

В комплект входят:
 1. Массажер Sleep Professor ISee Special с пультом и ремнем для регулировки
 2. Батареи типа типа AA - 4 шт
 3. Наушники
 4. Инструкция по эксплуатации
 5. Зарядное устройство.

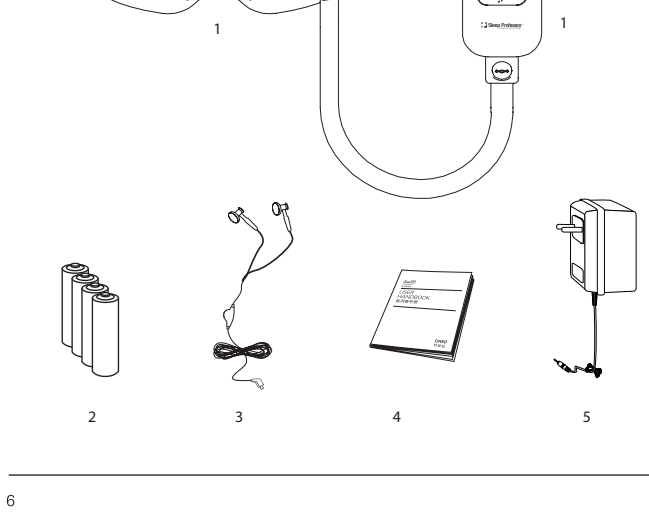

5


6

ISee371说明书.Indd 8-9

2009-7-21 9:05:38

Описание, внешний вид

Массажер Sleep Professor ISee Special

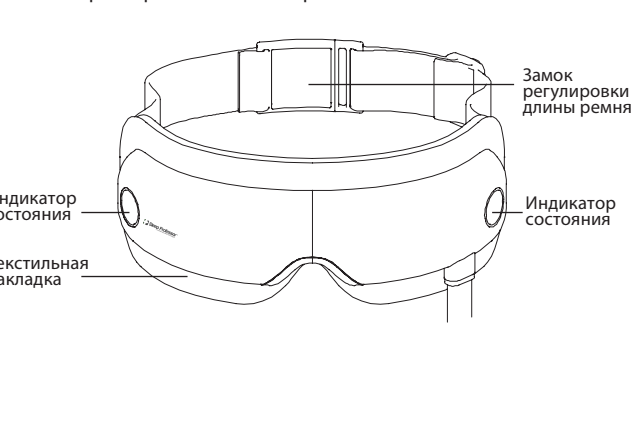

Подготовка и использование

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАУШНИКОВ:
 1. Используйте наушники, которые идут в комплекте с массажером.
 2. Вставьте USB-штеккер наушников в разъем USB на пульте устройства.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ.

По умолчанию. Режим по умолчанию настроен на 5 минутный массаж, включающий: воздушно - компрессионный (чередование режимов), мультичастотный вибромассаж (цикл разминаний), среднее температурное воздействие, магнитное воздействие. Запускается автоматичеки при однократном нажатии на кнопку Включения/времи/выключения. Воздействие магнитного поля, создаваемого массажером при всех режимах массажа остается одинаковой интенсивности.
 Выбор режимов. Выбор стандартных режимов возможен с помощью кнопки: Выбор режимов. Доступно 6 стандартных комбинаций:
 1 - мультичастотный вибромассаж, музыкальное сопровождение;
 2 - инфракрасный нагрев, музыкальное сопровождение
 3 - воздушно-компрессионный массаж, музыкальное сопровождение
 4 - мультичастотный вибромассаж, компрессионный массаж, музыкальное сопровождение
 5 - мультичастотный вибромассаж, инфракрасный нагрев, музыкальное сопровождение
 6 - воздушно-компрессионный массаж, инфракрасный нагрев, музыкальное сопровождение.

В рамках стандартных программ массажа можно регулировать отдельные параметры: воздушно-компрессионного, мультичастотного вибромассажа, инфракрасного нагрева, длительности режима и музыки.

7


8

ISee371说明书.Indd 10-11


2009-7-21 9:05:38

Подготовка и использование


РЕГУЛИРОВКА РЕЖИМОВ.
 Нажимайте кнопку «Выбор режима давления воздуха», чтобы изменять режимы в следующей последовательности. От легкого (режим 1) к более интенсивному воздействию (режим 4).

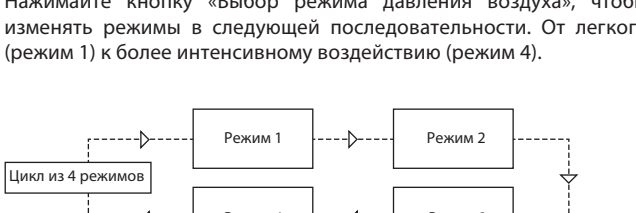

РЕГУЛИРОВКА НАГРЕВА.
 Нажимайте кнопку «Выбор режима нагрева» в приведенной последовательности, чтобы изменять интенсивность нагрева. Для выключения опции нагрева удерживайте кнопку «Выбор режима нагрева».

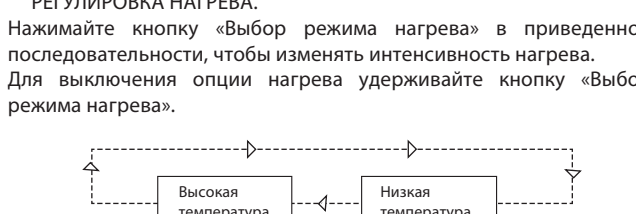

РЕГУЛИРОВКА ВИБРАЦИИ.

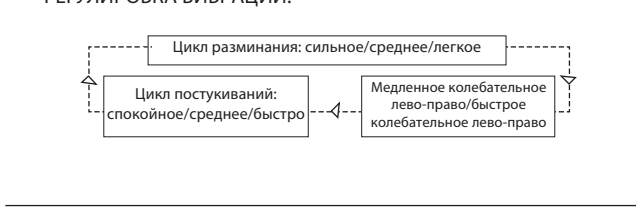

9

10

ISee371说明书.Indd 12-13

2009-7-21 9:05:38

Устранение неполадок, хранение, транспортировка

При возникновении проблем при использовании устройства, используйте инструкции, приведенные ниже.
 Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!

Проблема	Причина	Решение
Не получается включить устройство	Состояние кабеля	Проверить соединение
	Уровень заряда батареи	Если низкий уровень заряда, замените батарею
Слабая вибрация или нагрев	Уровень заряда батареи	Если низкий уровень заряда, замените батарею

ТРАНСПОРТИРОВКА
 Устройство обладает прочной формой и допускается к перевозке в упаковке без каких-либо ограничений. Избегайте воздействия атмосферных осадков, ударов, падений.

Устройство рекомендуется хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей и высоких температур месте. Также во время длительного хранения, необходимо вынимать элементы питания. Обслуживание заключается в периодической замене элементов питания и в регулярной чистке устройства при помощи сухой или увлажненной спиритом хлопковой или фланелевой ткани.

Ресурс работы массажера не ограничен и зависит от частоты и интенсивности использования. Гарантия производителя: 1 год, распространяется на отсутствие производственных дефектов, и не распространяется на элементы питания. Утилизацию продукта следует производить по схеме обычных товарно-бытовых отходов. Аккумуляторные батареи подлежат утилизации на предприятии, специализирующемся в этой области.

Net weight: 458g

Технические характеристики, обслуживание, контакты

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Температура: 5-40°C
 Влажность: <=80%
 Атмосферное давление: 645-795 мм рт.ст. Работает от сети: 220В

РАЗМЕРЫ
 Основное устройство: D206 x H203 x Ш108 x B86мм
 Пуль: D141 x Ш55,5 x B33 мм Вес нетто (без упаковки): ~458 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Атмосферное давление: 860 - 1060 ГектоПа
 Интенсивность магнитного поля: 50 - 250 мТл
 Вольтаж: 6 В, 1000 мА
 Мощность: <6 Вт
 Температура нагрева: 45-50 °C Частота вибрации: 40-100 Гц
 Рекомендуется:

- Проверять источник питания. Не включайте устройство, если источник напряжения превышает допустимый диапазон.
- Регулярно проверяйте кабель и накладки для глаз. Если обнаружено какое-либо повреждение или обрыв, немедленно прекратите использование массажера и свяжитесь с импортером.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 • Выключите массажер перед проведением чистки пульта.
 • Храните устройство в безопасном месте и не кладите на него какой-либо вес.
 • Храните без доступа влаги и пыли.
 • Не разбирайте устройство самостоятельно.

Дата изготовления указана на упаковке.
 Импортер: ООО «Торговый Дом «Аскона» 601900, Россия, Владимирская обл., г. Козлов ул. Комсомольская, 116р, стр. 25.
 По всем вопросам обращаться по телефонам горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-555-222-5, 8-800-200-40-90 www.sleepprofessor.ru
 Производитель: Shenzhen BREO Technology Co., LTD. 22/F Jinshan Building, 5033 Shennan East Road, Shenzhen City, China (Китай).
 T. 86 755 820 733 36, F. 86 755 820 734 34.
 www.askona.ru



11

12

ISee371说明书.Indd 12-13

2009-7-21 9:05:38